



STR 細胞認証テストキット・サービス

~STR Cell Authentication Testing Service~

世界最大の生物資源バンク ATCC によるヒト細胞株の STR 細胞認証テストキット・サービスです！

- ・論文投稿時や助成金申請前に
- ・他のラボより細胞株を
 分与してもらった際に
- ・ラボ内ストック作製後に

細胞認証を！

ご好評につきプラス 10%OFF キャンペーン実施中！！

期間：2017年9月4日(月)～11月30日(木)ご注文分迄

型番	注文数	通常価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
135-XV	1～4個	¥37,000/kit	¥33,300/kit (10%OFF)
	5～9個	¥35,150/kit (5%OFF)	¥31,450/kit (15%OFF)
	10～19個	¥34,040/kit (8%OFF)	¥30,340/kit (18%OFF)
	20個以上	¥32,930/kit (11%OFF)	¥29,230/kit (21%OFF)

《特長》

- 細胞懸濁液をサンプルコレクションカードに
 スポットするだけで、DNA 抽出不要
- Amelogenin を含む 18 ローカスの波形
 データをご提供
- ATCC® によるデータ解釈・保証書付き

ユーザーの声

国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所

清野 透 先生 (発がん・予防研究分野 主任分野長)


実際に使用してサンプル調整を行いました。細胞数を合わせてFTA紙にスポットするだけで非常に簡単でした。サンプル送付から約1週間後、データ解釈が付いた結果を受信し、スピードも申し分ないと思います。今回、継代を重ねた細胞株も解析したところ、データベースとのマッチ率は若干低い結果となり、保有している細胞株の定期的なSTR解析による品質管理の重要性を感じています。

ご注文から結果到着まで、ゲノム抽出不要の簡単3ステップ！

- 1 STR 細胞認証テストキットをご注文
- 2 細胞懸濁液をサンプルコレクションカードへスポット
- 3 ATCC®へサンプルを送付し、結果を待つだけ！

● 納品データより一部抜粋

Amelogenin を含む 18 ローカスの波形データ

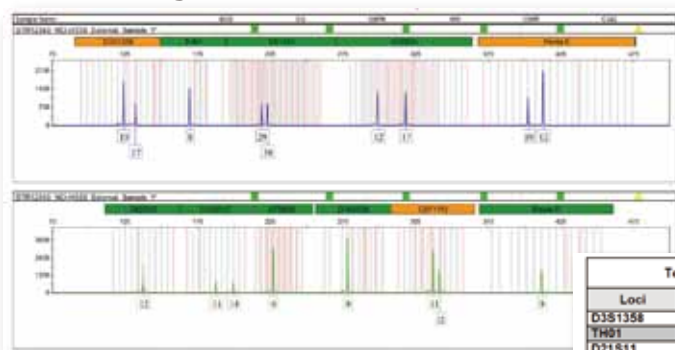

ATCC® による
結果解釈付き

Loci	Test Results for Submitted Sample				ATCC Reference Database Profile			
	Query Profile: NCI-H358				Database Profile: NCI-H358			
D3S1358	15	17						
TH01	8				6			
D21S11	29	30						
D18S51	12	17						
Penta E	10	12						
D5S818	12				10	12		
D13S317	11	14			8	12		
D7S820	9				10	11		
D16S539	9				12	13		
CSF1PO	11	12			11	12		
Penta D	9	15						
Amelogenin	X				X	Y		
vWA	16	17			17			
D18S1179	11	14						
TPOX	8	10			8	9		
FGA	23							
D19S433	13	14.2						
D2S1338	16	24						

ATCC® データベースとの照合結果

ご購入にあたってのご注意

- ・ 研究用途のみにご使用ください。医療診断用途等には使用しないでください。
- ・ ATCC® へのサンプル発送につきましてはお客様のご責任においてお願い申し上げます。サンプルの ATCC® への送料につきましては、お客様のご負担となります。ご購入いただく ATCC® STR 細胞認証テストキット代には当該送料は含まれておりません。発送途上での紛失等のトラブル防止のため、追跡サービス付帯の発送方法をお薦め致します。
- ・ ATCC® がサンプルを受け取ってから、同社の約 5 営業日後に Sample Submission Form に記載されたメールアドレスへ解析報告書が送付されます。ただし、ご発注のタイミングや ATCC® 側での本サービスの受託状況によりましては報告書の納期が遅れる場合があります。メールの設定によっては、ATCC® からのメールが迷惑メールボックスに振り分けられる可能性もありますので、迷惑メールボックスもご確認ください。
- ・ サンプルの ATCC® への返送期限はございませんが、お届けしたキット自体の保証はお客様受領後 30 日間となっておりますので、その期間内のご使用をお薦め致します。
- ・ 波形データは Amelogenin を含む 18 ローカス分提供されますが、解析結果については、ATCC® データベースと 9 ローカスを照合した結果が提供されます。
- ・ 解析結果についてのお問い合わせは ATCC® まで (TEL: +1-703-365-2700 Email: STRTechSupport@atcc.org) 直接お問い合わせください。なお、弊社ではデータ解釈、解析結果等に関するお問い合わせにはご対応致しかねますことを予めご了承ください。お電話による対応は営業時間内（現地時間）となります。

【代理店使用欄】

【輸入総代理店】住商ファーマインターナショナル株式会社
ATCC 事業グループ
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号
住友商事竹橋ビル 12 階
TEL: 03-5220-1540 / FAX: 03-5220-1541
E-mail: atcc@summitpharma.co.jp
Web: http://www.summitpharma.co.jp/